




お口をあけて！

日本製
MADE IN JAPAN

●食べる機能を引き出す●
リードスプーン

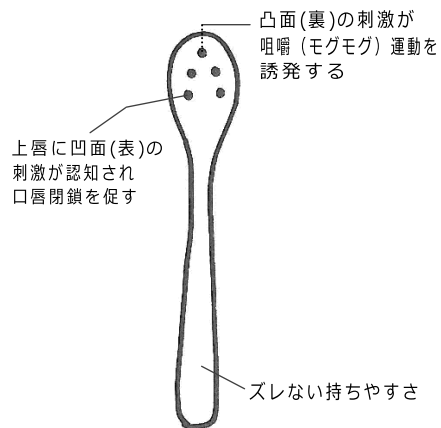

中面に食べさせ方イラスト付き！



使用上の注意

- 初めてご使用になる前に、商品に不具合がない事を確認して下さい。
- ご使用前に台所中性洗剤で洗ってからお使い下さい。
- 錆びにくい材質ですが、ご使用後洗ってから充分水気を切り乾燥してから保管して下さい。
- この取扱説明書を大切に保管しておいて下さい。

品質表示

材質：18-8 ステンレス鋼



LAC

ラックヘルスケア株式会社
<http://www.lac-hc.co.jp>

本社：〒542-0081 大阪市中央区南船場2-10-2
TEL: 06-6244-0636 FAX: 06-6244-0836
東京オフィス TEL: 03-5419-8050
九州オフィス TEL: 096-340-8101

●食べる機能を引き出す●
リードスプーン
意匠登録出願中 介助用

凸面の刺激が

口腔機能向上

舌の動きと咀嚼(モグモグ)を誘発する

介助する人にとっても食べさせやすい
ズレなく持ちやすい柄

おいしい食べよう！



(とらえる・噛んでまとめる・送り込む・飲み込む) を導く

「食べる」を引き出す！ リードスプーン 3つのメリット

スプーンの使い方



1

スれない
持ちやすさ




舌の動きを感じられる軽さで持つ



▶ 座位の場合

▶ リクライニングの場合

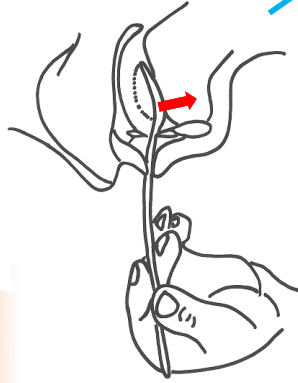

舌のくぼみにスプーンの底を
押しあてる



上顎にスプーンの先端をふれる

口唇を閉じる



2

上唇に凹面の刺激が
認知され口唇閉鎖を
促す



上唇でスプーンの底をぬぐい取る

3

凸面の刺激が
咀嚼（モグモグ）運動を
誘発する



ワンポイント

嚥下のリズム（ムセにくい嚥下パターン）

えくぼをつくる



息をとめる



うなづく



息をはく（ハア～）